

ROTARY
GRINDING &
POLISHING
INSTRUMENTS



INSTRUMENTOS ROTATORIOS DE DESGASTE Y PULIDO

MADE IN GERMANY

DENTISTRY

TABLE OF CONTENTS

TABLA DE CONTENIDO

		CAD/CAM					
		Composite Composite	Hybrid Ceramic Cerámica Híbrida	Feldspar Ceramic Cerámica Feldespática	Lithium Disilicate Disilicato De Litio	Zirconia Zirconio	
PAGE Pagina		ABRASIVES ABRASIVO					
GRINDING DESGASTE	CERASTONE ^{green}	8	SIC		●	●	●
	CERASTONE ^{white}	8	ALOX	●			
FINISHING & POLISHING ACABADO & PULIDO	DIACOMP ^{® plus}	9	◆	●	●		
	EASYCOMP	10	SIC	●			
	ECOCOMP	11	SIC	●			
	COMPOSOFIT	11	ALOX	●			
	DIAPOL [®]	12	◆		●	●	●
	DIACERA	13	◆			●	●
	DIAPRO	14	◆			●	●
	ECOCERAM	15	SIC		●	●	●
	UNIVERSAL	15	SIC	●	●	●	●
	EVEFLEX	16	SIC			●	●
	FLEXI-DIA	17	◆	●	●	●	●
	FLEXI-D	17	ALOX	●			
	EVEBRUSH	18	SIC	●			
	BRACKET ^{plus}	18	SIO			●	
	PROPHYCLEAN	19	SIO				
	DIASTRIPS	19	◆	●	●	●	●

PAGE Pagina

ABRASIVES
ABRASIVO



PROCESSING STEPS
PASOS DE PROCESADO

GRIT
ABRASIVO

Product	Grain	Material	3D Printing	Gold / Amalgam	NEM Alloys	Titanium	Acrylics	Prophylaxis	Steps	VC	C	M	F	EF
CERASTONE ^{green}	8	SIC		●	●									F
CERASTONE ^{white}	8	ALOX												EF
DIACOMP ^{® plus}	9		●						2			M	F	
EASYCOMP	10	SIC							2			M	F	
ECOCOMP	11	SIC							2			M	F	
COMPOSOFIT	11	ALOX							3		C	M	F	
DIAPOL [®]	12								3		C	M	F	
DIACERA	13								2			M	F	
DIAPRO	14								2			M	F	
ECOCERAM	15	SIC							3		C	M	F	
UNIVERSAL	15	SIC		●	●	●	●		1			M		
EVEFLEX	16	SIC		●	●	●	●		3		C	M	F	
FLEXI-DIA	17			●	●	●	●		4		C	M	F	EF
FLEXI-D	17	ALOX		●	●	●	●		4		C	M	F	EF
EVEBRUSH	18	SIC		●					1				F	
BRACKET ^{plus}	18	SIO						●						
PROPHYCLEAN	19	SIO						●	2		C	M		
DIASTRIPS	19				●	●		●	3		C	M	F	

● particularly suitable
especialmente apto

● suitable
apropiado

VC very coarse
extra grueso

C coarse
grueso

M medium
medio

F fine
fino

EF extra fine
extra fino

Diamond impregnated
Diamantado

SIC Silicon carbide
Carburo de silicio

ALOX Aluminium oxide
Oxido de aluminio

SIO Silicon oxide
Silicio

Disposable
Desechable


Recommended RPM
RPM rec.

Packaging unit
Unidad de embalaje

TWIST

ONE SHAPE FOR EVERY SURFACE

UNA FORMA PARA CUALQUIER SUPERFICIE

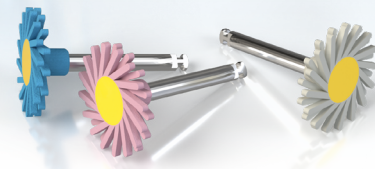

One instrument for every dental surface
Un instrumento para cualquier superficie



Extraordinary durability
Durabilidad extraordinaria



Intuitive application
Aplicación intuitiva



Preservation of the surface structure
Preserva la estructura inicial de la superficie





Reduced heat generation
Creación de calor reducida



Brilliant polishing results
Resultados de pulido brillantes

THE OCCLUSION SOLUTION

EL ESPECIALISTA PARA LA OCLUSIÓN

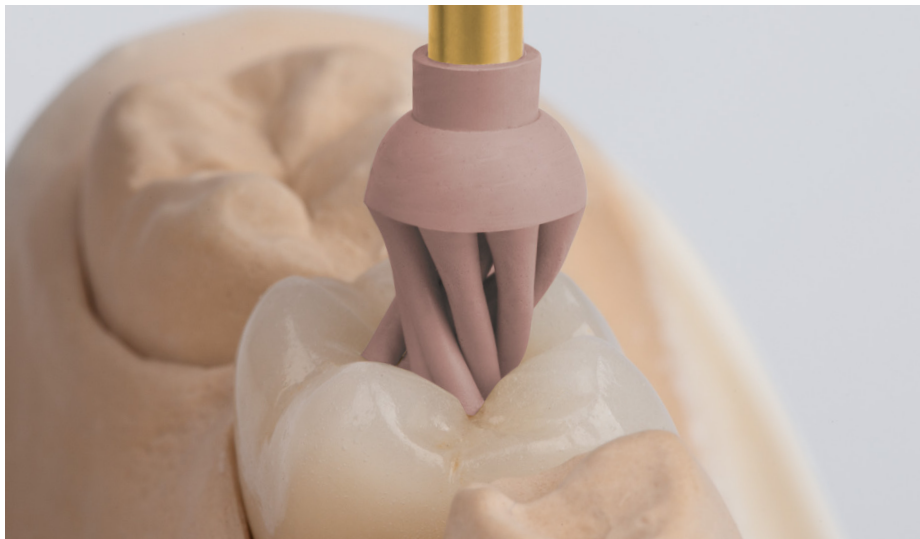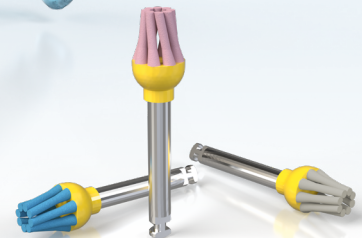

Designed specifically for occlusal polishing
Diseñado específicamente para el pulido oclusal



Applicable without polishing paste
Aplicación sin pasta de pulido



Intuitive application
Aplicación intuitiva




Reaches deep fissures due to twisted polishing bristles
Con las laminas giradas llega a fisuras profundas



Easily reprocessable brush shape
Forma de cepillo fácil de esterilizar



Brilliant polishing results
Resultados de pulido brillantes

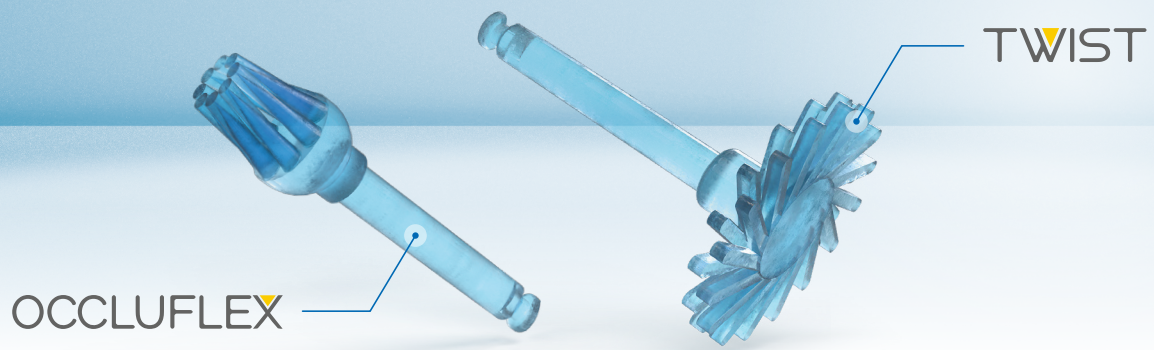

Why I am working with TWIST & OCCLUFLEX

The surface quality of my direct composite restorations, posterior and anterior, changed radically since I started using EVE DIACOMP *plus*. In only two polishing steps, it is possible to get a remarkably smooth and shiny surface result that not only enhances the aesthetics, but also significantly improves the longevity of my direct composite restorations.

The application of the TWIST and OCCLUFLEX shapes just differs in the area of application in the oral cavity. TWIST polishers are more adequate for anterior restorations with a flatter surface. On the other hand, OCCLUFLEX is more suitable for posterior restorations due to its design. The special geometry of the latter ones make them more efficient when polishing in deeper regions of my restorations.

Dr. Vasco Nunes da Silva
Dentist and lecturer

Por que yo trabajo con TWIST & OCCLUFLEX

La calidad de las superficies de mis restauraciones directas en los sectores frontales y posteriores han mejorado radicalmente desde que uso EVE Diacomp *plus*. En solo dos pasos de pulido es posible conseguir una superficie lisa y brillante en restauraciones de composite, no solo bajo aspectos estéticos sino también de durabilidad.

La aplicación de los sistemas TWIST y OCCLUFLEX solamente se diferencia en sus áreas de aplicación. Pulidores TWIST se usan mayoritariamente en las superficies planas del sector frontal. OCCLUFLEX por otro lado tienen su fuerte en las superficies de la oclusión en los molares. Le geometría única de pulidores OCCLUFLEX les hace muy eficaces en áreas profundas de mis restauraciones.

Dr. Vasco Nunes da Silva
Dentista y docente




Dr. Vasco Nunes da Silva
Dentist and lecturer
Dentista y docente



DIACOMP^{® plus} | TWIST

Page 9 / Página 9

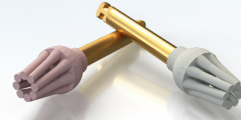

DIACOMP^{® plus} | OCCLUFLEX

Page 9 / Página 9




CERASTONE

Composite, Feldspar Ceramic, Amalgam, Gold
Composite, Cerámica Feldespática, Amalgama, Oro

GRINDING SYSTEM | SISTEMA DE AFILADO

- Ceramic bonded abrasives
- Silicon carbide and corundum grit
- For detailed shaping of dental materials
- Abrasivos cerámicos
- Carburo de silicio y óxido de aluminio como abrasivos
- Para la elaboración detallada de la estructura

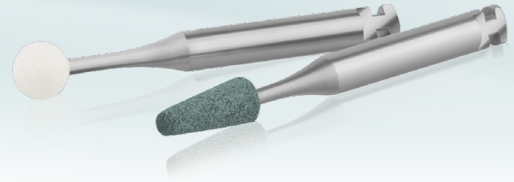

Application Aplicación:	Grit Abrasivo:	Bonding Ligante:	
Silicon carbide abrasives for Feldspar Ceramic, Amalgam and Gold Abrasivos con carburo de silicio para cerámica feldespática, amalgama y oro	FINE fino	MEDIUM medio	RA
Arkansas stones for Composite finishing Piedras Arkansas para restauraciones de composite	EXTRA FINE extra fino	HARD duro	RA
Arkansas stones for Composite finishing Piedras Arkansas para restauraciones de composite	EXTRA FINE extra fino	HARD duro	FG

FINE FINO

15.000 - 25.000 min⁻¹
max. 30.000 min⁻¹

10, 100 pieces / unidades



Item / Artículo:	CSG-RA-601	CSG-RA-645	CSG-RA-649	CSG-RA-661	RA
REF:	8601	8603	8604	8605	
Dimensions / Dimensiones (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	

EXTRA FINE EXTRA FINO

RA: 15.000 - 25.000 min⁻¹
max. 30.000 min⁻¹

FG: 80.000 - 100.000 min⁻¹
10, 100 pieces / unidades



Item / Artículo:	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-649	CSW-RA-661	RA
REF:	8631	8633	8634	8636	
Dimensions / Dimensiones (mm):	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-649	CSW-FG-661	FG
REF:	8694	8696	8697	8698	
Dimensions / Dimensiones (mm):	3 x 3	3 x 7	2,5 x 6	2,5 x 7	

DIACOMP® plus




Composite, Hybrid Ceramic, 3D Printing Hybrid Material
Composite, Cerámica Híbrida, Material Híbrido De Impresión 3D

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO

- 2-step polishing system for high-shine on all composite materials
- Polishers specifically adapted to each processing step
- Best results even on very hard composites
- Sistema de 2 pasos para alto brillo en todas las superficies de composite
- Pulidores específicamente adaptados a cada paso
- Resultados estupendos en composites especialmente duros

Set RA 345 REF 9095

DCP-OFm | DCP-OFF

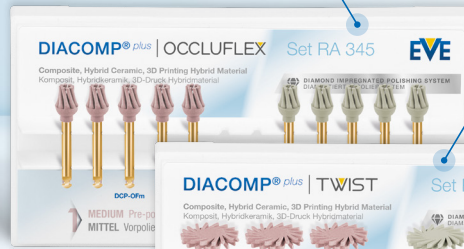

Set RA 342 REF 9086

DT-DCP14m | DT-DCP14f



Set RA 344 REF 9094

DCP-W11m | DCP-OFm | DCP3m | DCP2m
DCP-W11f | DCP-OFF | DCP3f | DCP2f



1 MEDIUM Pre-polishing
MEDIO Pre-pulido

2 FINE High-shine polishing
FINO Alto brillo

2 PROCESSING STEPS
PASOS DE PROCESADO



3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades

RA	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11m	DCP1m	DCP3m	Item / Artículo:
	6184	6175	6181	6171	6173	REF:
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	Dimensions / Dimensiones (mm):



3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹


1, 10 piece / unidades

RA	DT-DCP14f	DCP-OFF	DCP-W11f	DCP1f	DCP3f	Item / Artículo:
	6284	6275	6281	6271	6273	REF:
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	Dimensions / Dimensiones (mm):

EASYCOMP

Composite · Composite

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

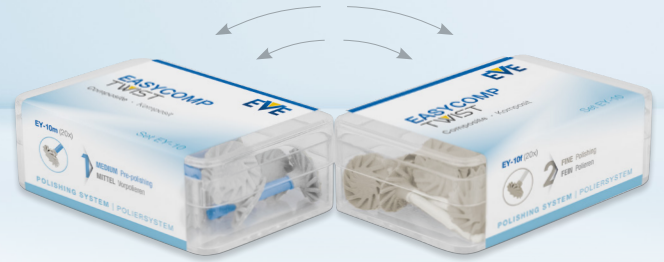

- Economic single-use polishing system for composite
- Elimination of reprocessing
- Small geometries simplify the accessibility of difficult to reach areas
- Optimised range of available shapes for all surface structures
- Sistema desechable para composite
- Eliminación del proceso de reprocesamiento
- Geometrías pequeñas para áreas de difícil acceso
- Gama optimizada de formas para todas las superficies

2 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO

1 MEDIUM Pre-polishing
MEDIO Pre-pulido

2 FINE Polishing
FINO Pulido



3.000 - 8.000 min⁻¹
* 3.000 - 5.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



40 pieces / unidades

Set EY-10

20x EY-10m | 20x EY-10f



Set EY-OF *

20x EY-OFm | 20x EY-OFf



Item / Artículo:	Set EY-10	EY-10m	EY-10f	Set EY-OF	EY-OFm	EY-OFf	RA
REF:	9033	3280	3380	9032	3275	3375	
Dimensions / Dimensiones (mm):	-	11 x 1,6	11 x 1,6	-	5,5 x 8,7	5,5 x 8,7	

Set EY-3

20x EY-3m | 20x EY-3f



Set EY-1

20x EY-1m | 20x EY-1f



3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



40 pieces / unidades

Item / Artículo:	Set EY-3	EY-3m	EY-3f	Set EY-1	EY-1m	EY-1f	RA
REF:	9031	3273	3373	9030	3271	3371	
Dimensions / Dimensiones (mm):	-	6,2 x 6,4	6,2 x 6,4	-	4 x 6,9	4 x 6,9	

ECOCOMP

Composite · Composite



POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For efficient polishing of composite surfaces
- Silicon carbide grit
- Hard bonding for high durability
- Para el pulido eficaz de superficies de composite
- Carburo de silicio como abrasivo
- Ligante duro para alta durabilidad

Set RA 210 REF 9071

EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f



2 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO

- 7.000 - 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 pieces / unidades

RA	EC11m	EC3Km	EC7m	EC11f	EC3Kf	EC7f	Item / Artículo:
	5181	5173	5177	5281	5273	5277	REF:
	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	Dimensions / Dimensiones (mm):

COMPOSOFT


Composite · Composite

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For smoothing, pre-polishing and polishing composite
- Aluminium oxide grit
- Soft silicone bonding adapts to the composite surface
- Para el alisado, pre-pulido y pulido de composite
- Oxido de aluminio como abrasivo
- Ligante de silicona flexible se adapta a las superficies de composite

Set RA 129 REF 9089

CS11g | CS2Bg | CS7g
CS11m | CS2Bm | CS7m
CS11f | CS2Bf | CS7f

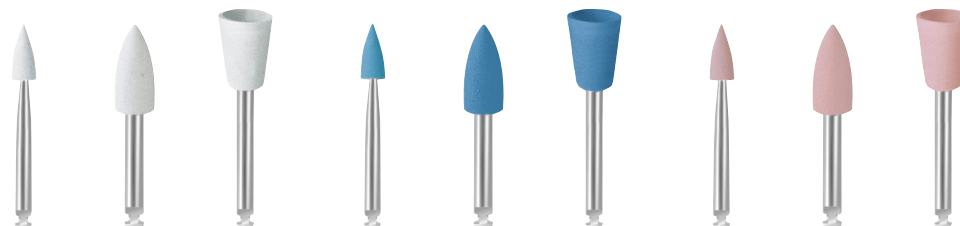

3 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO

- 5.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 pieces / unidades


RA	CS11g	CS2Bg	CS7g	CS11m	CS2Bm	CS7m	CS11f	CS2Bf	CS7f	Item / Artículo:
	2581	2592	2577	2681	2692	2677	2781	2792	2777	REF:
	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	3 x 7,5	5 x 10	7 x 10	Dimensions / Dimensiones (mm):

DIAPOL®

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia
Cerámica Feldspática, Disilicato De Litio, Zirconio

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO

- 3-step polishing system for all porcelain materials
- Diamond grit for highest efficiency
- Surface corrections without additional glazing
- Sistema de pulido de 3 pasos para todo tipo de cerámica
- Abrasivo diamantado para máxima eficacia
- Correcciones de superficies sin necesidad de glaseado

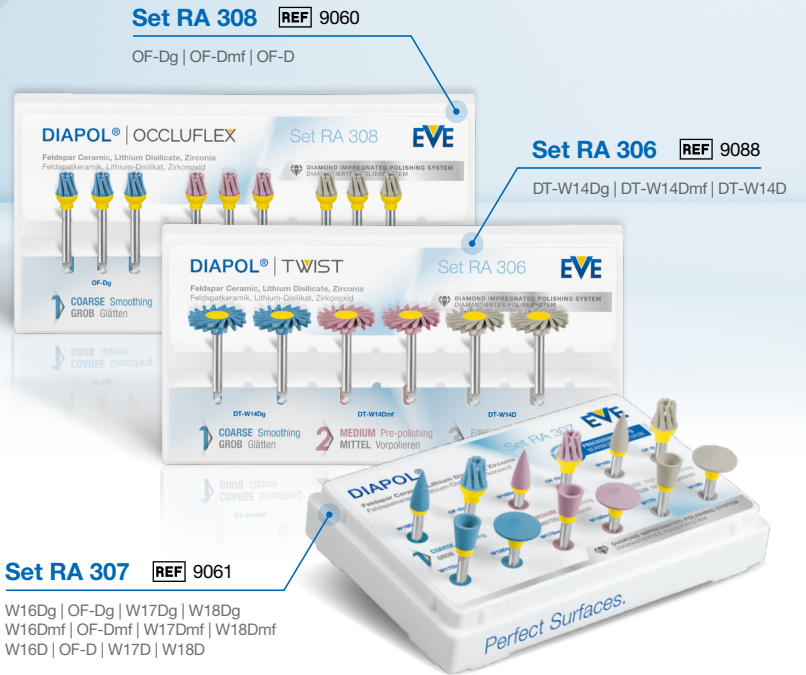

3 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO


1 COARSE Smoothing
GRUESO Alisado

2 MEDIUM Pre-polishing
MEDIO Pre-pulido

3 FINE High-shine polishing
FINO Alto brillo

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades

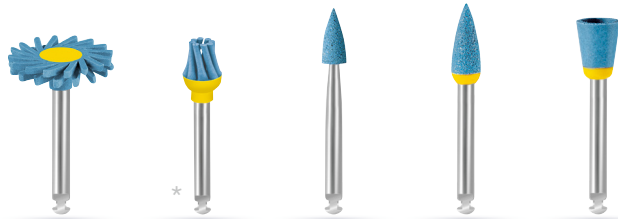

Item / Artículo:	DT-W14Dg	OF-Dg	W11Dg	W16Dg	W17Dg	RA
REF:	7084	7075	7081	7086	7087	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades



Item / Artículo:	DT-W14Dmf	OF-Dmf	W11Dmf	W16Dmf	W17Dmf	RA
REF:	7184	7175	7181	7186	7187	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades



Item / Artículo:	DT-W14D	OF-D	W11D	W16D	W17D	RA
REF:	7284	7275	7281	7286	7287	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

DIACERA

Zirconia · Zirkonio



DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO

- Especially suitable for full contour zirconia restorations
- High diamond concentration for more efficiency
- Avoids repeated glazing after retouching
- Especialmente apto para zirconio monolítico
- Alta concentración de diamante para mayor eficacia
- Elimina requerimiento de re-gaseado después de correcciones

NEW


Set RA 326 REF 9062

OF-DCmf | OF-DC



Set RA 323 REF 9091

DT-W14DCmf | DT-W14DC

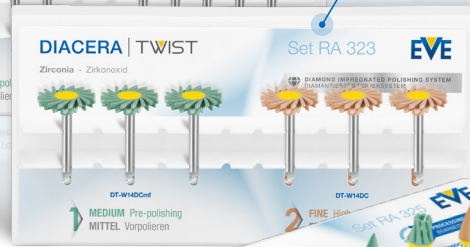

NEW

Set RA 325 REF 9063

W16DCmf | OF-DCmf | W17DCmf | W18DCmf
W16DC | OF-DC | W17DC | W18DC

+ DIASYN[®] plus (Grinding · Desgaste)
DYP-W13g



1 MEDIUM Pre-polishing
MEDIO Pre-pulido

2 FINE High-shine polishing
FINO Alto brillo


2 PROCESSING STEPS
PASOS DE PROCESADO



7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades

RA	DT-W14DCmf	OF-DCmf	W11DCmf	W16DCmf	W17DCmf	Item / Artículo:
	7684	7675	7681	7686	7687	REF:
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	Dimensions / Dimensiones (mm):

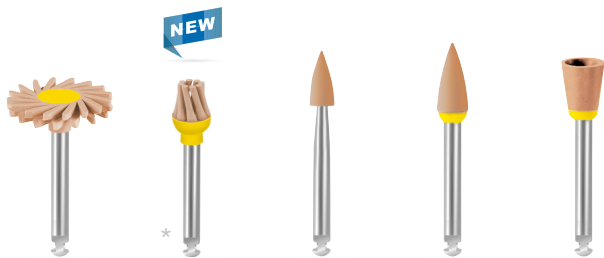

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades

RA	DT-W14DC	OF-DC	W11DC	W16DC	W17DC	Item / Artículo:
	7784	7775	7781	7786	7787	REF:
	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	Dimensions / Dimensiones (mm):

DIAPRO

Lithium Disilicate · Disilicato De Lítio

DIAMOND IMPREGNATED POLISHING SYSTEM
SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO

- Especially suitable for silicate porcelain
- Diamond grit for highest efficiency
- Polishing result matches glazing
- Especialmente indicado para cerámicas de silicato
- Abrasivo diamantado para máxima eficacia
- Resultado de pulido equivale el glaseado

NEW

Set RA 366 REF 9064

OF-DPmf | OF-DP



Set RA 363 REF 9092

DT-W14DPmf | DT-W14DP



NEW

Set RA 365 REF 9065

W16DPmf | OF-DPmf | W17DPmf | W18DPmf
W16DP | OF-DP | W17DP | W18DP

+ DIASYNT^{plus} (Grinding · Desgaste)
DYP-W13m



2 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO

1 MEDIUM Pre-polishing
MEDIO Pre-pulido

2 FINE High-shine polishing
FINO Alto brillo

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades



Item / Artículo:	DT-W14DPmf	OF-DPmf	W11DPmf	W16DPmf	W17DPmf	RA
REF:	7884	7875	7881	7886	7887	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

1, 10 piece / unidades



Item / Artículo:	DT-W14DP	OF-DP	W11DP	W16DP	W17DP	RA
REF:	7984	7975	7981	7986	7987	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	4 x 10	6 x 7,5	

ECOCERAM

Feldspar Ceramic · Cerámica Feldespática



POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For finishing and polishing porcelain restorations
- Silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive
- Para el alisado y pulido de restauraciones de cerámica
- Ligante de silicona se adapta a la superficie procesada
- Carburo de silicio como abrasivo

Set RA 160 REF 9076

W2BVK | W7VK
W2BNK | W7NK
W2BSK | W7SK



1 COARSE Smoothing GRUESO Alisado



2 MEDIUM Pre-polishing MEDIO Pre-pulido



3 FINE Polishing FINO Pulido



3 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO

7.000 - 15.000 min⁻¹
max. 25.000 min⁻¹

10, 100 pieces / unidades

RA	W2BVK	W7VK	W2BNK	W7NK	W2BSK	W7SK	Item / Artículo:
	1592	1577	1692	1677	1792	1777	REF:
	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	5 x 10	7 x 10	Dimensions / Dimensiones (mm):

UNIVERSAL

Composite, Feldspar Ceramic, Amalgam, Gold
Composite, Cerámica Feldespática, Amalgama, Oro

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For smoothing all dental materials
- Soft silicone bonding adapts to the surface being processed
- Silicon carbide abrasive
- Para el alisado de cualquier material dental
- Ligante de silicona se adapta a la superficie procesada
- Carburo de silicio como abrasivo

Set RA 101 REF 9070

W11 | W1 | W2 | W2B | W5 | W7 | W8 | W9



1 MEDIUM Smoothing MEDIO Alisado



1 PROCESSING STEP PASO DE PROCESADO

7.000 - 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

10, 100 pieces / unidades

RA	K11	76RA	W11	W1	W5	W7	Item / Artículo:
	1011	9576	1081	1071	1075	1077	REF:
	11 x 6	5	3 x 7,5	5,5 x 15	9 x 8,5	7 x 10	Dimensions / Dimensiones (mm):

EVEFLEX


Amalgam, Gold · Amalgama, Oro

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For polishing amalgam and gold
- 3-step polishing system
- Silicon carbide grit
- Para el pulido de amalgama y oro
- Sistema de pulido de 3 pasos
- Carburo de silicio como abrasivo

Set RA 240 REF 9090

ET-AF14 | ET-BV14 | ET-GH14

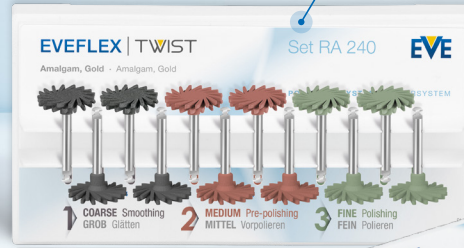

Set RA 209 REF 9075


AF11 | AF7 | AF3K
BV11 | BV7 | BV3K
GH11 | GH7 | GH3K



3 PROCESSING STEPS PASOS DE PROCESADO




- 7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 pieces / unidades

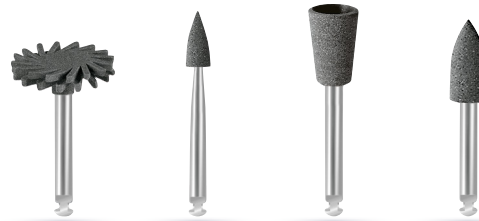

Item / Artículo:	ET-AF14	AF11	AF3K	AF7	RA
REF:	4684	4681	4673	4677	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	

- 7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 pieces / unidades

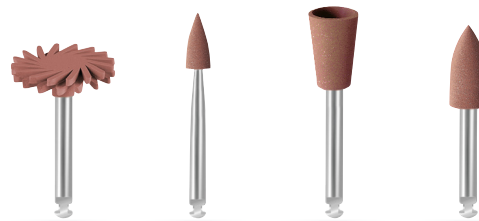

Item / Artículo:	ET-BV14	BV11	BV3K	BV7	RA
REF:	4784	4781	4773	4777	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	

- 7.000 - 12.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 pieces / unidades



Item / Artículo:	ET-GH14	GH11	GH3K	GH7	RA
REF:	4884	4881	4873	4877	
Dimensions / Dimensiones (mm):	14 x 1,6	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	

FLEXI-DIA

Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic
 Cerámica Feldespática, Disilicato De Litio, Circonia, Cerámica Híbrida

DIAMOND COATED POLISHING SYSTEM
 SISTEMA DE PULIDO DIAMANTADO

- Flexible polishing discs with diamond coating (single side)
- For use in a pulling or pushing motion
- Extra-thin plastic foil
- Discos de pulido flexibles revestidos con diamante (unilateral)
- Para uso en modo de tirar o empujar
- Lámina de plástico extra fina

Starter Set 14 REF 9006

FD-14Dxg | FD-14Dg | FD-14Dmf | FD-14D

+ MANDREL 95RA



						<ul style="list-style-type: none"> 3, 10, 100 pieces / unidades 7.000 - 10.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 100 pieces / unidades available with mandrel con o sin vástago
RA	FD-14Dxg	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D	95RA	Item / Artículo:
	9146	9147	9148	9149	9595	REF:
	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	-	Dimensions / Dimensiones (mm):

FLEXI-D

Composite, Amalgam, Gold
 Composite, Amalgama, Oro

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- Flexible polishing discs coated with aluminium oxide (single side)
- For surface preparation and interproximal polishing
- For use in a pulling or pushing motion
- Discos de pulido flexibles con revestido de óxido de aluminio (unilateral)
- Para la preparación de superficies y pulido interproximal
- Para uso en modo de tirar o empujar

Starter Set 14 REF 9001

FD-14g | FD-14m | FD-14f | FD-14sf

+ MANDREL 95RA




						<ul style="list-style-type: none"> 3, 10, 100 pieces / unidades 7.000 - 10.000 min⁻¹ max. 20.000 min⁻¹ 100 pieces / unidades available with mandrel con o sin vástago
RA	FD-14g	FD-14m	FD-14f	FD-14sf	95RA	Item / Artículo:
	9141	9142	9143	9144	9595	REF:
	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	-	Dimensions / Dimensiones (mm):

EVEBRUSH

Composite · Composite


POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- For high-shine polishing on composite
- For polishing occlusal fillings
- Fibre with silicon carbide grit
- Application without polishing paste
- Heat resistant and autoclavable polyamide fibre
- Para el pulido brillante de composite
- Para el pulido de caras oclusales
- Fibra con abrasivo de carburo de silicio
- Aplicación sin pasta de pulido
- Fibra poliamida resistente al calor y esterilizable

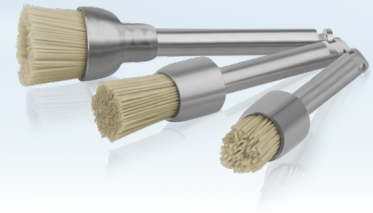

FINE: High-shine polishing
HARDNESS: hard

FINO: Alto brillo
GRUESO: duro

 max. 10.000 min⁻¹

 1, 10 piece / unidades



Item / Artículo:	WT1	WZ1	WS1	RA
REF:	9491	9492	9493	
Dimensions / Dimensiones (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	

BRACKET *plus*

Debonding · Debonding

POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO


- For removal of remnants after debonding
- Does not harm the enamel
- PROPHYCLEAN is recommended for removal of hard bracket remnants
- Eliminación de adhesivos después del retiro de brackets
- No daña el esmalte
- Recomendamos PROPHYCLEAN para retirar bultos de restos de adhesivos

Set RA 431 **REF** 9097

BRP11 | BRP7 | BRP3 | BRP6

+ PROPHYCLEAN
(Selective removal · procesado puntual)
PC-100



 5.000 - 7.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹

 10, 100 pieces / unidades




Item / Artículo:	BRP11	BRP7	BRP3	BRP6	RA
REF:	5681	5677	5673	5676	
Dimensions / Dimensiones (mm):	3 x 7,5	5 x 10	5,5 x 8,5	10 x 0,7	

PROPHYCLEAN

Tooth Cleaning, Debonding
Limpieza Dental, Debonding


POLISHING SYSTEM | SISTEMA DE PULIDO

- Removes calculus and stains
- Special abrasive prevents damage to the enamel
- For mechanical prophylactic treatment
- Fibre free
- Blue option for heavy stains
- Elimina sarro y descoloraciones
- Abrasivo especial previene daños al esmalte
- Para el tratamiento profiláctico mecánico Sin fibras
- Opción azul para descoloraciones importantes

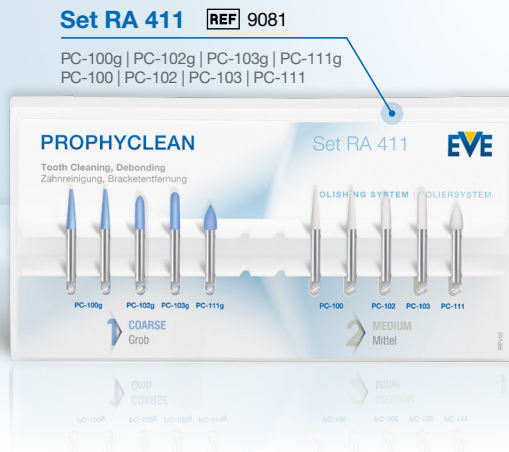

Set RA 411 REF 9081

PC-100g | PC-102g | PC-103g | PC-111g
PC-100 | PC-102 | PC-103 | PC-111

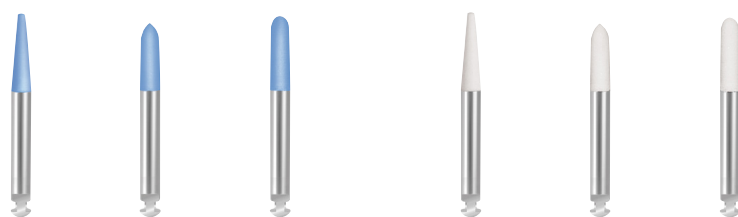

- 5.000 - 10.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 piece / unidades

RA	PC-100g	PC-102g	PC-103g	PC-100	PC-102	PC-103	Item / Artículo:
	8700	8702	8703	8800	8802	8803	REF:
	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	Dimensions / Dimensiones (mm):

DIASTRIPS

Composite, Feldspar Ceramic, Lithium Disilicate, Zirconia, Hybrid Ceramic, NEM Alloys, Titanium
Composite, Cerámicas Feldespáticas, Disilicato De Litio, Circonía, Cerámica Híbrida, Aleaciones No Nobles, Titanio

DIAMOND COATED SEPARATING STRIPS
TIRAS DE SEPARACIÓN DIAMANTADAS

- For manual surface processing
- Interdental application
- Perforation removes the cut material
- Para el procesamiento de superficies manual
- Aplicación interdental
- Perforaciones retiran el material desgastado

Set PDL2,5 REF 9012
PDL-45/2,5 | PDL-35/2,5 | PDL-10/2,5

Set PDL4 REF 9014
PDL-45/4 | PDL-35/4 | PDL-10/4



- 9 pieces / unidades

PDL-45/4	PDL-45/2,5	PDL-35/4	PDL-35/2,5	PDL-10/4	PDL-10/2,5	Item / Artículo:
9101	9106	9102	9107	9103	9108	REF:
4 x 150	2,5 x 150	4 x 150	2,5 x 150	4 x 150	2,5 x 150	Dimensions / Dimensiones (mm):
0,11	0,11	0,10	0,10	0,07	0,07	Thickness / Grosor (mm):






Download brochure
Descargar folleto

MADE IN GERMANY

Perfect Surfaces.

EVE Ernst Vetter GmbH
Neureutstr. 6
75210 Kelttern, Germany

-  +49 (0) 72 31 97 77 -0
-  +49 (0) 72 31 97 77 -99
-  info@eve-rotary.com

www.eve-rotary.com


SCAN ME!

Interested in EVE products?

Scan the QR code and find an
EVE distributor in your country.

Interesado en productos EVE?

Escanea el código QR y encuentra
un distribuidor EVE en tu país.

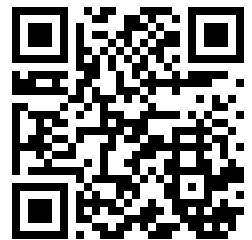

The specifications and appearance of the products are subject to change without notice. Printed colour can be slightly different from actual colour. Changes, variations and errors reserved. Notes: www.eve-rotary.com/downloads

Las especificaciones y apariencia de productos pueden cambiar sin previa advertencia. El color de impresión puede diferir del color real. Se reserva el derecho a realizar modificaciones y corregir errores. Advertencias: www.eve-rotary.com/downloads

E002_KT0651_Ed11.1-A-EN-ES